

GÉZATONE

**ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР
AMG 143**



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

БОЛЬ, СКОВАННОСТЬ И СПАЗМЫ МЫШЦ ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ, ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНЫХ ТРЕНИРОВОК, ПРИ СИДЯЧЕЙ РАБОТЕ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ.


СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ПРОРАБОТКИ ТКАНЕЙ И МЫШЦ ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР AMG143 GEZATONE ОКАЗЫВАЕТ РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, АКТИВИЗИРУЕТ ЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ И ЛИМФЫ, ИЗБАВЛЯЯ ОТ НЕПРИЯТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ.



ПРИ БОЛЕЗНЕННОСТИ И ПЕРЕНАПРЯЖЕНИИ МЫШЦ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК



ПРИ СКОВАННОСТИ ДВИЖЕНИЙ И ЗАЖАТОСТИ ПРИ НАРУШЕНИИ ОСАНКИ, СИДЯЧЕЙ РАБОТЕ

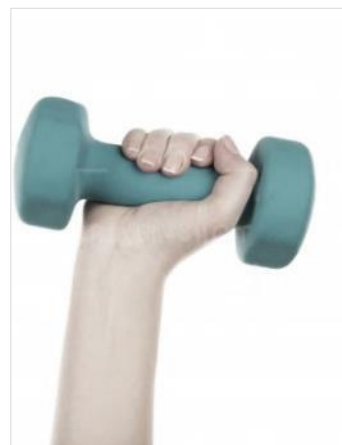

НИЗКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНИРОВОК.



ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ОГРАНИЧЕНИИ ДИАПАЗОНА ДВИЖЕНИЯ.



ОНЕМЕНИЕ И СКОВАННОСТЬ МЫШЦ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ НЕПОДВИЖНОСТИ



ПРИ СТРЕССЕ, ОБЩЕЙ УСТАЛОСТИ И НЕДОСТАТКЕ ЖИЗНЕННЫХ СИЛ

ФУНКЦИИ

ДЕЙСТВИЕ МАССАЖЕРА ОСНОВАНО НА ПЕРКУССИИ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ТКАНИ С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ И ЗАДАННОЙ АМПЛИТУДОЙ. НАСАДКА ПРИБОРА, СОВЕРШАЯ СЕРИЮ ЧАСТЫХ, ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩИХ УДАРОВ, РАССЛАБЛЯЕТ МЫШЦЫ И ЛИКВИДИРУЕТ ТОЧЕЧНЫЕ БОЛЕЗНЕННЫЕ УПЛОТНЕНИЯ.

AMG143 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МИОФАСЦИАЛЬНОГО МАССАЖА И ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ ПОДВИЖНОСТЬ, УСТРАНЯЯ СЦЕПКУ МЫШЦЫ И ФАСЦИИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ УЛУЧШАЕТСЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МЫШЦ И УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН.



Артикул 1301299



ПЕРКУССИОННЫЙ
МАССАЖ



МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ
МАССАЖ




РЕЛАКСИРУЮЩИЙ
МАССАЖ



ТОНИЗИРУЮЩИЙ
МАССАЖ

ДЛЯ КОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

МАССАЖЕР СОЗДАН ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА, ПРОФЕССИИ И ОБРАЗА ЖИЗНИ.

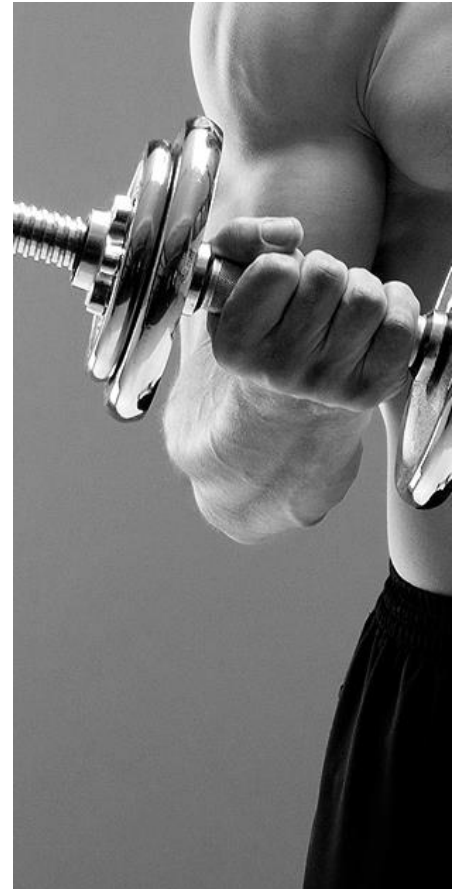

ДЛЯ ТЕХ, КТО УВЛЕКАЕТСЯ
ФИТНЕССОМ, ЙОГОЙ

ДЛЯ МАССАЖИСТОВ И ТРЕНЕРОВ

ДЛЯ ТЕХ, КТО
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ
ТРАВМ ОПОРНО -ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА

ДЛЯ ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ
А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОСТО
УСТАЕТ НА РАБОТЕ

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ
ПРИХОДИТСЯ ЧАСТО НАГИБАТЬСЯ
И ПОДНИМАТЬ РЕБЕНКА

ПРИ МАЛОПОДВИЖНОМ ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ

ДЛЯ АТЛЕТОВ И БОДИБИЛДЕРОВ

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРОФЕССИЙ С ФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКОЙ

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
ЛЮБИТЕЛЕЙ И
ПРОФЕССИОНАЛОВ ЛЮБЫХ
ВИДОВ СПОРТА

ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖ



ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖ ОСНОВАН НА СЕРИИ БЫСТРЫХ УДАРОВ - ПОСТУКИВАНИЙ, ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩИХ В МЯГКИЕ ТКАНИ. СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ БОЛИ, РАССЛАБЛЕНИЮ МЫШЦ И БЫСТРОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ. МАССАЖ УЛУЧШАЕТ КРОВОТОК, ПОМОГАЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА, УВЕЛИЧИВАЕТ ДИАПАЗОН ДВИЖЕНИЯ МЫШЦ.

МАССАЖЕР ОКАЗЫВАЕТ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ТОЧЕЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЛАСТИ НАПРЯЖЕНИЯ МЫШЦ, ГДЕ МЯГКИЕ ТКАНИ НУЖДАЮТСЯ В ВОССТАНОВЛЕНИИ И ОБЛАСТИ ГДЕ ЕСТЬ УЧАСТКИ ЛОКАЛЬНОГО МЫШЕЧНОГО УПЛОТНЕНИЯ.

Артикул 1301299

ЭФФЕКТЫ



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВО-
ОБРАЩЕНИЯ



УСТРАНЕНИЕ
УЧАСТКОВ БОЛЕЗНЕННОГО
УПЛОТНЕНИЯ В МЫШЦАХ



ПОВЫШЕНИЕ
ВЫНОСЛИВОСТИ
МЫШЦ



РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ
И АНТИСТРЕССОВОЕ
ДЕЙСТВИЕ



АКТИВИЗАЦИЯ
ЛИМФОДРЕНАЖА



ПОВЫШЕНИЕ
ОКСИГЕНАЦИИ



УСТРАНЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3300

УДАРОВ В МИНУТУ



- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** СЕАНС МАССАЖА ЗА 15 МИНУТ ИЗБАВЛЯЕТ ОТ ДИСКОМФОРТА И БОЛИ.
- **НАЛИЧИЕ АККУМУЛЯТОРА** ПОЗВОЛЯЕТ ПРИМЕНЯТЬ МЫШЕЧНЫЙ МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ТАМ, ГДЕ УДОБНО: В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В УДОБНОЕ ВРЕМЯ.
- **НАСАДКИ** ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВСЕ ГРУППЫ МЫШЦ ОБЛАДАЮТ ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ И ЛЕГКО МОЮТСЯ
- **НЕ ТРЕБУЕТСЯ КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО**, МАССАЖЕР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, НЕ СНИМАЯ ОДЕЖДУ

Артикул 1301299

6

6 НАСАДОК В
КОМПЛЕКТЕ



РАБОТАЕТ ОТ
АККУМУЛЯТОРА

30

30 УРОВНЕЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ



ИНДИКАТОР ЗАРЯДА
АККУМУЛЯТОРА



ЧЕХОЛ – СУМКА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРКУССОР ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, 1 СЕАНС МАССАЖА ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НЕ ТОЛЬКО НА ЗАЖАТЫЕ И СПАЗМИРОВАННЫЕ МЫШЦЫ, НО И НА ВСЕ ТЕЛО, УСТРАНЯЯ УСТАЛОСТЬ.




НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

МОЩНЫЙ МОТОР ИМЕЕТ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА, МАССАЖЕР НЕ МЕШАЕТ ОКРУЖАЮЩИМ, А ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ МАССАЖ ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА.

ДЛИТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ РАБОТА

ПРИБОР РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА, ВЫ НЕ ПРИВЯЗАНЫ К РОЗЕТКЕ . ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА ХВАТАЕТ НА 120 МИНУТ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ.

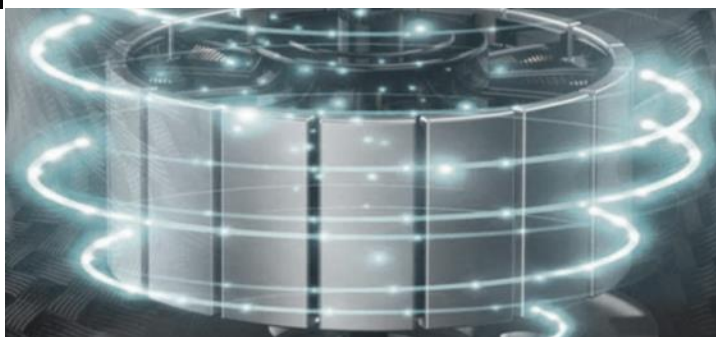

СЕНСОРНАЯ РАБОЧАЯ ПАНЕЛЬ

ОТОБРАЖАЕТ ИНТЕНСИВНОСТЬ И РЕГУЛИРУЕТ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО ПЕРЕЙТИ В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ. ПОКАЗЫВАЕТ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА.



30 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОБРАТЬ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНУЮ СИЛУ МАССАЖА И ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОЦЕДУРЫ.



МАССАЖНЫЕ НАСАДКИ

БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ **ШЕСТИ НАСАДОК** РАЗНОЙ ФОРМЫ, AMG143 ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ УДАРНЫЙ МАССАЖ ДЛЯ ПЛЕЧ, МЫШЦ ШЕИ И ГРУДИ, РУК, НОГ, ОКОЛОПОЗВОНОЧНЫХ МЫШЦ И ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ ТЕЛА, ГДЕ ЭТО НЕОБХОДИМО.

КРУГЛАЯ
НАСАДКА



ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БОЛЬШИЕ И СРЕДНИЕ МЫШЕЧНЫЕ ГРУППЫ.

НАСАДКА
«ЛОПАТКА»



ДЛЯ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ, СПИНЫ И ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ.

НАСАДКА
«ВИЛКА»



ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКОЛОПОЗВОНОЧНЫЕ МЫШЦЫ, ШЕЮ И ТРАПЕЦИЮ, ИКРОНОЖНЫЕ МЫШЦЫ.

ПЛОСКАЯ
НАСАДКА



МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ МЫШЕЧНЫХ ГРУПП.

НАСАДКА
«ПУЛЯ»



ДЛЯ ПРОРАБОТКИ ТРИГГЕРНЫХ ТОЧЕК, ЛОКАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗОНЫ БОЛЕЗНЕННОСТИ

НАСАДКА
«ПАЛЕЦ»



ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЛАСТЬ СТОП, КИСТЕЙ И ТОЧЕЧНОГО МАССАЖА.

ВНЕШНИЙ ВИД МАССАЖЕРА



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ИНДИКАТОР
ИНТЕНСИВНОСТИ МАССАЖА
(от 1 до 30)

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР
ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА
(от 1 до 99).

КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ МАССАЖА

КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ МАССАЖА



КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ МАССАЖА /
ПЕРЕХОДА В ЖДУЩИЙ РЕЖИМ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

С МАССАЖЕРОМ AMG 143 МОЖНО ПРОВОДИТЬ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ МАССАЖА



ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР, ПОДСОЕДИНИВ ШТЕКЕР ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА К РАЗЪЁМУ НА ТОРЦЕ ПРИБОРА. АККУМУЛЯТОР МОЖНО ЗАРЯЖАТЬ КАК ОТДЕЛЬНО, ТАК И ПРИСОЕДИНЕННЫМ МАССАЖЕРУ.

ВСТАВЬТЕ НАСАДКУ В ГНЕЗДО И ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ. ДОТРОНЬТЕСЬ ДО СЕНСОРНОЙ КНОПКИ, ПРИБОР ВКЛЮЧИТСЯ С УРОВНЕМ ИНТЕНСИВНОСТИ 1.



Артикул 1301299



ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПКУ «ПЛЮС», ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ – КНОПКОЙ СО ЗНАКОМ «МИНУС» МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ – 30.

ПРОВЕДИТЕ МАССАЖ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ, МЕДЛЕННО ПЕРЕМЕЩАЯ МАССАЖНУЮ НАСАДКУ.

В ЗОНЕ МЫШЕЧНОГО УПЛОТНЕНИЯ (НА ТРИГГЕРНОЙ ТОЧКЕ), ЗАДЕРЖИТЕ МАССАЖЕР В ТЕЧЕНИЕ 10 – 15 СЕКУНД.


РЕЗУЛЬТАТЫ



AMG143 ВОССТАНАВЛИВАЕТ И УЛУЧШАЕТ ЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ, ТКАНИ ПОЛУЧАЮТ КИСЛОРОД И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ИЗБАВЛЯЮТСЯ ОТ ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА, УСКОРЯЕТСЯ ПРОЦЕСС ВЫВЕДЕНИЯ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ МЫШЦ. ВОЗДЕЙСТВУЕТ НАПРАВЛЕННО НА ПРОБЛЕМНЫЕ УЧАСТКИ И «РАЗБИВАЕТ» ТРИГГЕРНЫЕ ТОЧКИ – УЧАСТКИ СИЛЬНОЙ БОЛЕЗНЕННОСТИ В МЫШЦАХ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫСОКОГО ФИЗИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ.



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМА МЫШЦ

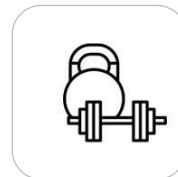

РАЗОГРЕВ» МЫШЦ
ПЕРЕД
ТРЕНИРОВКАМИ



ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРЕНИРОВОК



УМЕНЬШЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ
В МЫШЦАХ НОГ



УСТРАНЕНИЕ БОЛИ
И МЫШЕЧНОЙ
УСТАЛОСТИ



УМЕНЬШЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ В
МЫШЦАХ СПИНЫ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ТОНУСА
МЫШЦ



УЛУЧШЕНИЕ
САМОЧУВСТВИЯ,
РЕЛАКС



УЛУЧШЕНИЕ
ПОДВИЖНОСТИ И
ПОВЫШЕНИЕ
 ГИБКОСТИ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА, СУСТАВОВ И КОСТЕЙ, ПЕРЕЛОМЫ, РАСТЯЖЕНИЯ И РАЗРЫВЫ СВЯЗОК
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ (РАНЫ, ЦАРАПИНЫ, ССАДИНЫ, ОЖОГИ) В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ,
- НАЛИЧИЕ ДЕРМАТИТОВ, ДЕРМАТОЗОВ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, ПРИЕМ АНТИКОАГУЛЯНТОВ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ (ВАРИКОЗ, ТРОМБОФЛЕБИТ И ДРУГИЕ)
- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ГИПЕРТЕНЗИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ УСТРОЙСТВО НА ПОЗВОНОЧНИКЕ, КОСТНЫХ ВЫСТУПАХ, ГОЛОВЕ, ЛИЦЕ, В ЗОНЕ ПРОЕКЦИИ СЕРДЦА И НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ШЕИ.
- В ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ МАССАЖЕРА НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА	АС 220В, 50 Гц / DC 16,8 В, 1.0 А
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА	4 часа
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	2400мА*ч
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА	5 ЧАСОВ
УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ	30
СКОРОСТЬ РАБОТЫ	1000 – 3300 ударов в минуту
ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	5°С 40°С
ВЕС ПРИБОРА	1100 грамм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР AMG143
GEZATONE – 1

СМЕННЫЕ НАСАДКИ – 6

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО – 1

СУМКА – ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И
ТРАНСПОРТИРОВКИ – 1



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>